

MODUS ESWT[®]

RADIAL

SHOCKWAVE THERAPY



MODUS ESWT

Dispositivo per la terapia ad onde d'urto radiali tra i più potenti sul mercato

Potenze fino a 5 bar - 22 Hz

Leggero e portatile

Compressore interno

Schermo touch screen a colori


Possibilità di archiviazione utenti

Protocolli di lavoro



MODUS ESWT


Il Manipolo Modus grazie al suo design rinnovato risulta più leggero ed ergonomico

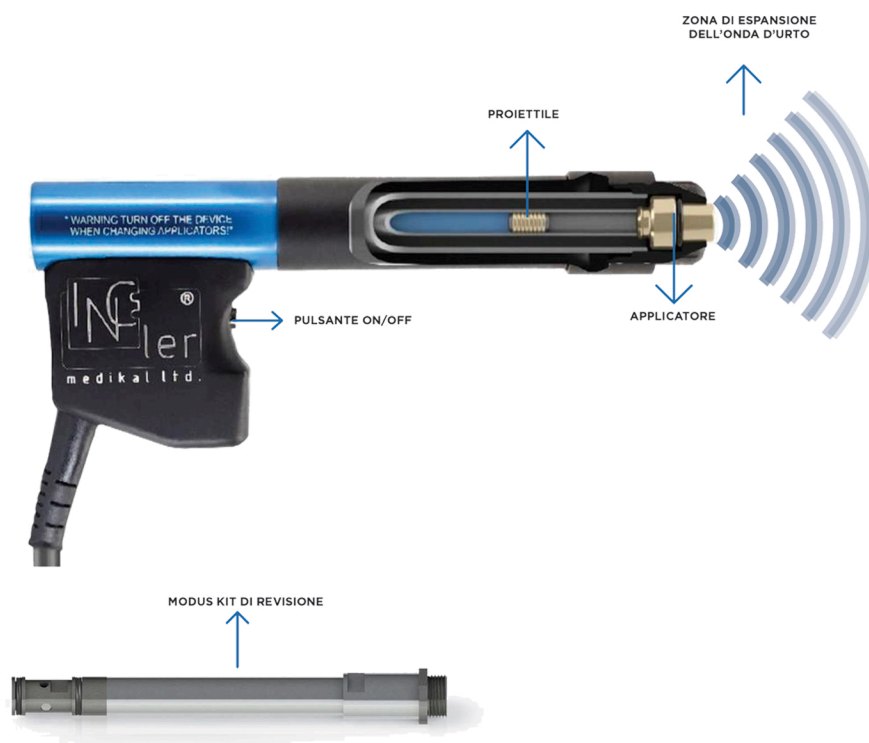

3.000.000
DI COLPI
GARANTITI

MODUS ESWT


Dispone di una vasta gamma di applicatori adatti ad ogni area di trattamento con densità di energia diverse e profondità di penetrazione fino a 125 mm

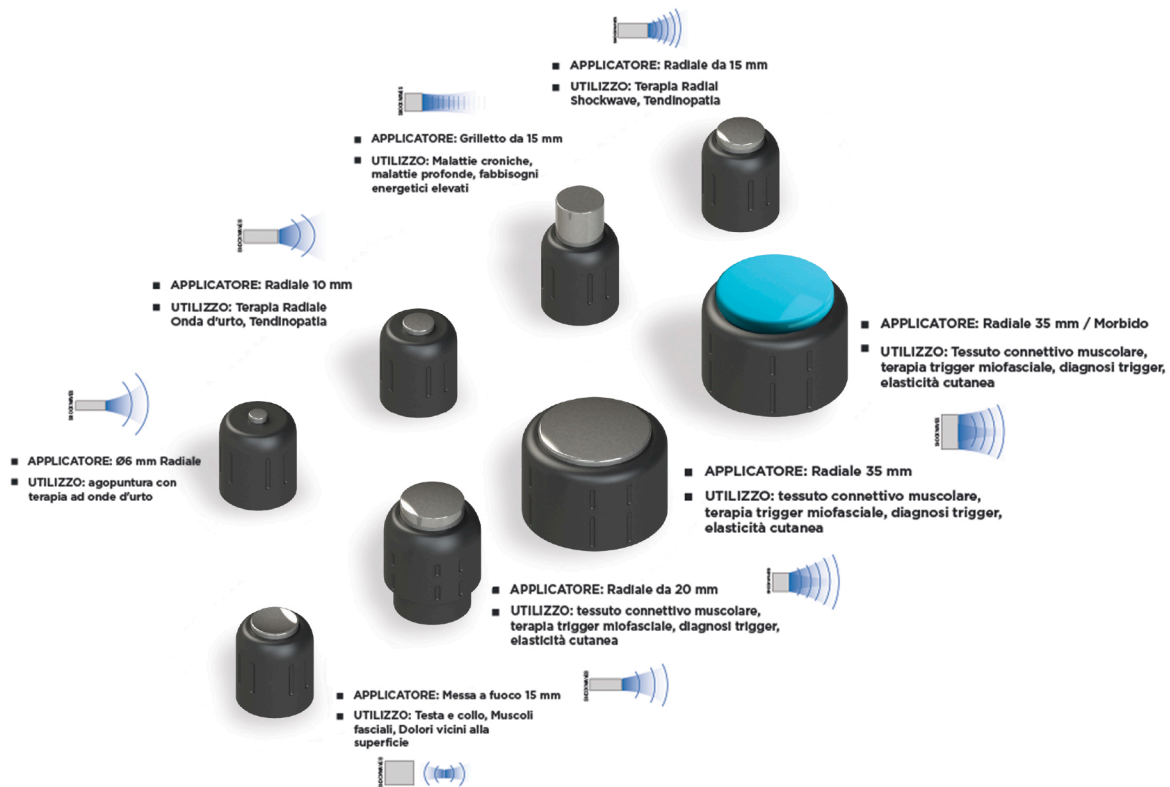

APPLICATORE SOFT

FAI LA DIFFERENZA CON LA SUA TECNOLOGIA INNOVATIVA!

Modus ESWT viene fornito di applicatore soft progettato per essere utilizzato nelle aree più sensibili

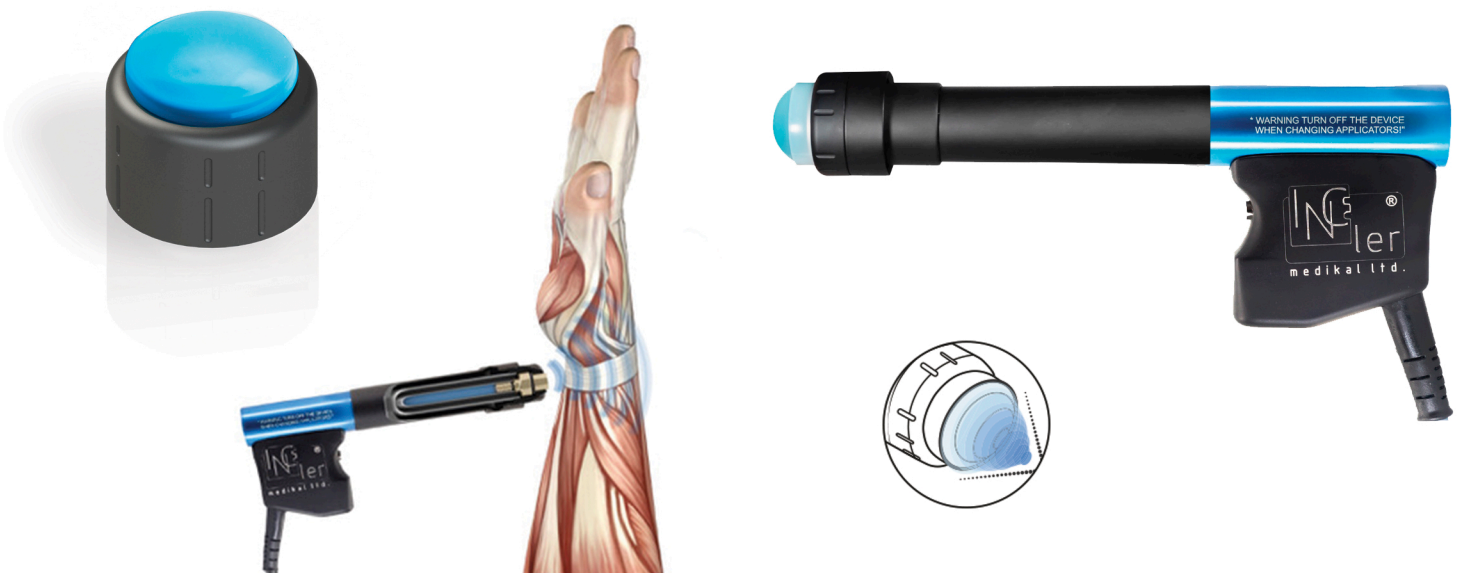

inceler medikal

İNCELERMEDİKAL.COM

İnceler Medikal
İvedik OSB Mah. 1472. Cad.
No: 120 Yenimahalle
Ankara/Türkiye

tel: +90 312 255 3346
fax: +90 312 255 3347
info@incelermedikal.com



PRODUTTORE	İNCELER MEDİKAL SAĞLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MODELLO	Modus®
MODALITÀ UTENTE	Singolo, Continuo, Automatico, Burst
PRESSIONE MEDIANTE	Compressore interno, modello portatile
ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA	Da 1 a 5 bar
FREQUENZA DI UTILIZZO	1-22 Hz
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 50 W
FUSIBILI	2 x 1 A, 230 V CA
SCHERMO	Schermo tattile TFT
AVVIO/FINE	Pulsante dell'unità principale, pulsante del manipolo e pedale opzionale
MEMORIA PARAMETRI	3- Definito dall'utente
ARRESTO TRATTAMENTO	20
PROTOCOLLO PRONTO	
TRATTAMENTO ISOLAMENTO	Isolamento interno del trasformatore 12 V CC
PASSWORD UTENTE	Sì
MANIPOLO	SISTEMA DI SOSPENSIONE, 3 milioni di shock pulse
APPLICATORI	Radiale da 6 mm Radiale da 10 mm Radiale da 15 mm Grilletto da 15 mm Messa a fuoco da 15 mm Radiale da 20 mm Radiale da 35 mm Radiale morbido da 35 mm
PESO	10 kg
DIMENSIONI	Unità di controllo: 320 mm X 390 mm X 125 mm
CLASSIFICAZIONE	Conforme ai criteri EN 60601-1. Classe 1 Parte applicata BF IP 20 (pedale a pedale IPX5) MOD 93/42 Classe CEE IIb Rapporto sul test EMC n. LVT, Ankara
TRATTAMENTO PERSONALIZZATO	Sì
SELEZIONI DI PROTOCOLLO	
AMBIENTE OPERATIVO	temperatura 10°C / 30°C umidità 30% / 75% pressione atmosferica 700 hPa / 1060 hPa
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO	temperatura -10°C / +40°C umidità 10% / 95% pressione atmosferica 500 hPa / 1060 hPa

**MODUS
ESWT
RADIALI**



Distribuito da:
Area medicale srls
via colombia 26 Pomezia (RM)
info@areamedicale.it

